

Restaurer, réparer et coller

Désormais disponible
en 3 fluidités différentes.



LE COMPOSITE FLUIDE ADAPTÉ À TOUTES LES CLASSES DE CAVITÉS

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Le composite fluide universel CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow s'est vu décerner cinq ans de suite des distinctions prestigieuses. Il est désormais disponible en 3 niveaux de fluidité distincts. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow assure des restaurations durables et esthétiques pour toutes les classes de cavités.

- ✓ Excellente tenue du brillant
- ✓ Facile à polir
- ✓ Restaurations durables
- ✓ Large gamme d'indications
- ✓ 3 niveaux de fluidité différents



3 FLUIDITÉS DIFFÉRENTES

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

High

Low

Super low


FLUIDITÉ



FLUIDITÉ ÉLEVÉE

- ✓ Excellentes mouillabilité et adaptation
- ✓ Pour les petites cavités
- ✓ Comme liner


1 min. après l'application
(horizontale et verticale)

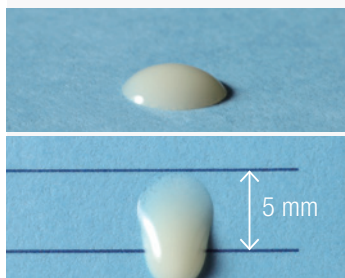

FLUIDITÉ MOYENNE

- ✓ Pour une large gamme de restaurations antérieures et postérieures


1 min. après l'application
(horizontale et verticale)

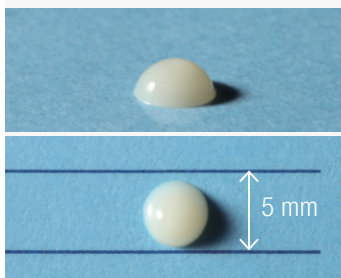

FAIBLE FLUIDITÉ

- ✓ Idéal pour la reconstruction de cuspides et de crêtes postérieures
- ✓ Conserve la forme donnée

1 min. après l'application
(horizontale et verticale)

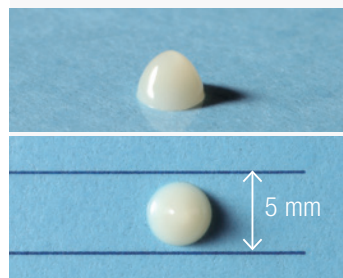

EXCEPTIONNELLEMENT FACILE À POLIR

La tenue du brillant est l'une des exigences importantes pour les restaurations en composite. Les particules de charge de CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow ont été conçues pour garantir la tenue du brillant des restaurations en composite dans le temps. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow est extrêmement facile et rapide à polir, au bout de quelques secondes à peine. Même

en frottant brièvement la surface avec une gaze ou un rouleau de coton imbibé d'alcool, on obtient un haut niveau de brillance. L'esthétique est encore améliorée par des clusters spéciaux diffusant la lumière, qui assurent des propriétés exceptionnelles d'adaptation de la couleur et une parfaite harmonisation avec la structure de la dent.

Brillant après avoir été
frotté à l'éthanol¹



CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow




Filtek Supreme
Ultra Flowable*




Tetric EvoFlow*

BRILLANT (%)^{1,2}

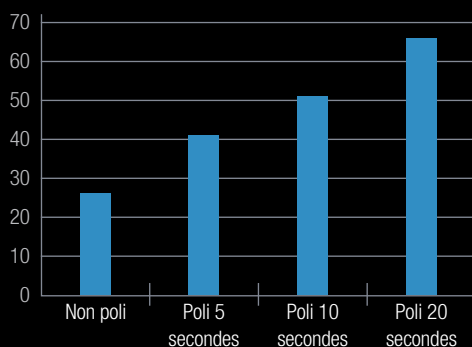

TEST D'ABRASION À LA BROSSE À DENTS^{1,2}

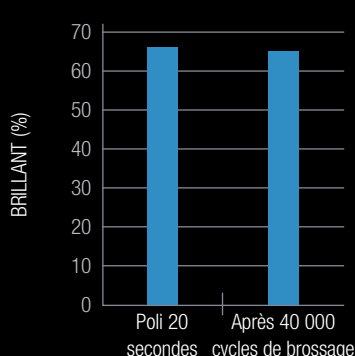



* Ne sont pas des marques de Kuraray Dental Inc. ¹ Source des données : Kuraray Noritake Dental Inc. ² Résultats d'essai après utilisation de CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Source : Dr. Nicola Scotti. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow low

MANIPULATION FACILE ET SUPÉRIEURE

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow a été conçu pour offrir les meilleures propriétés de manipulation. Nous utilisons notre propre silane breveté pour traiter les particules de charge. Ce silane et les charges en clusters submicroniques (de 0,18 μm à 3,5 μm) de CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow garantissent une manipulation facile du composite. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow est un composite non collant, et la conception spéciale de la seringue permet une application sans bulles.

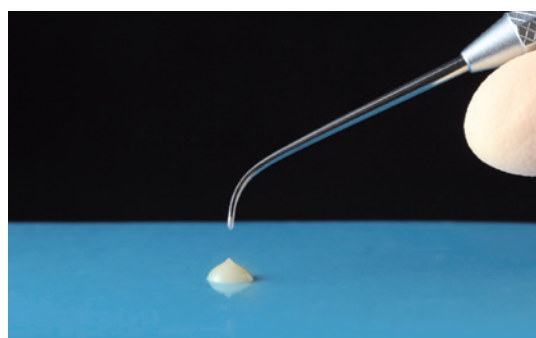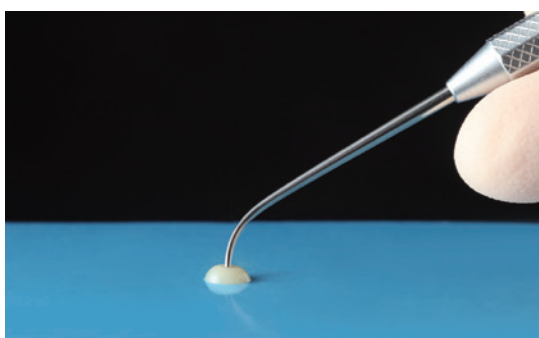

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Source : Dr. Nicola Scotti.

LARGE GAMME D'INDICATIONS

Le champ d'application du CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow est extrêmement large. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des indications les plus courantes. Faites votre propre choix.

	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow		
	High	Low	Super Low
Classe I		✓	✓✓
Classe II		✓	✓✓
Classe III		✓✓	✓
Classe IV		✓	✓✓
Classe V		✓✓	✓
Fond de cavité	✓✓	✓	
Pour coller		✓	✓✓
Réparation de composites	✓	✓✓	
Réparation de céramiques	✓	✓✓	✓
Réparation de CCM	✓	✓✓	✓
Correction des dents (forme et position)		✓	✓✓
Facettes composite au fauteuil		✓	✓✓

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Notre silane breveté permet un degré de charge élevé (poids jusqu'à 78 %, volume jusqu'à 64 %). Il garantit ainsi des propriétés mécaniques supérieures, qui rendent le produit indiqué même pour les restaurations postérieures.

	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
High	145 MPa	358 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
Super low	152 MPa	374 MPa


Conforme à la norme ISO 4049:2009. Source : Kuraray Noritake Dental Inc.



Cas réalisé avec
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low.

Source des images : Dr. Keiichi Hosaka.

COMPARAISON DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION

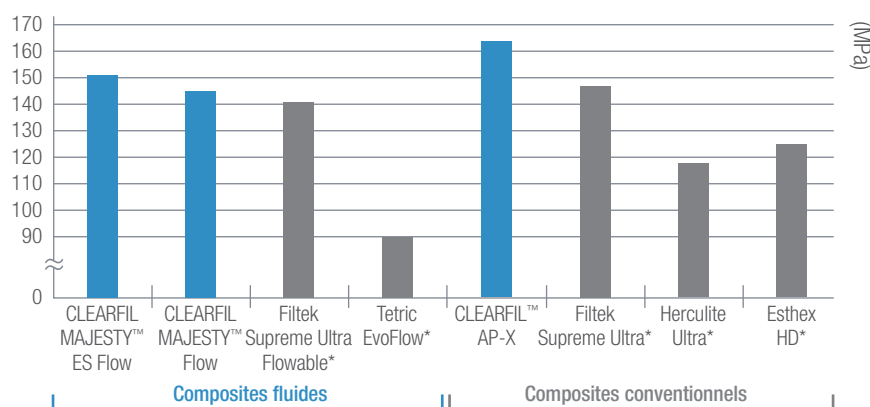

* Ne sont pas des marques de Kuraray Noritake Dental Inc.

Résultats d'essai après utilisation de CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Conforme à la norme ISO 4049:2009. Source : Kuraray Noritake Dental Inc.

TECHNOLOGIE DE DIFFUSION DE LA LUMIÈRE


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow reproduit fidèlement les propriétés de diffusion de la lumière du tissu dentaire. Il montre un niveau plus élevé de diffusion de la lumière dans les teintes plus opaques (dentine) et un niveau plus bas dans les teintes plus translucides. Dans la pratique, le résultat final est simple : cette diffusion de la lumière est l'outil ultime pour créer une restauration qui s'intègre sans effort au tissu dentaire naturel environnant.

La diffusion de la lumière a trait à la capacité d'un matériau à diffuser et à réfléchir les rayons lumineux sous différents angles. La technologie de diffusion de la lumière utilisée dans nos composites incorpore des particules de charge diffusant la lumière afin d'optimiser les propriétés esthétiques du matériau. La lumière est diffusée de la même manière que dans le tissu dentaire naturel et la restauration n'est pas visible. Résultat : une restauration parfaitement esthétique.


TEST DE DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

Le test ci-dessous montre la différence de diffusion de la lumière.


SUR FOND NOIR/BLANC

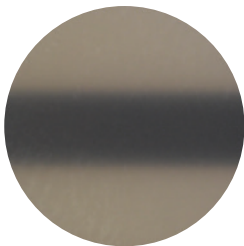

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(le plus haut niveau de diffusion de la lumière)

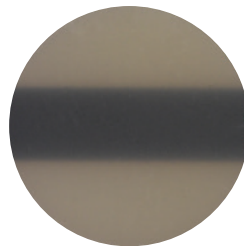

3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*

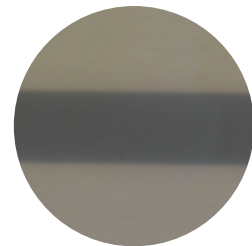

Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*

HORS FOND



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(le plus haut niveau de diffusion de la lumière)



3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*



Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*




Source : Dr. Nicola Scotti.

TEINTES DISPONIBLES


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

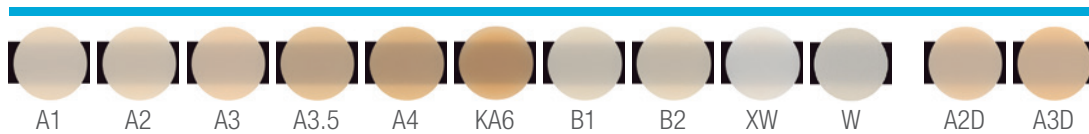

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

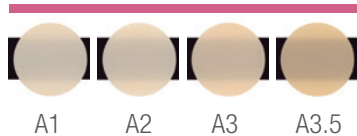

ÉTAPES CLINIQUES FACILES*



Préparer la cavité.



Appliquer l'adhésif selon les instructions du fabricant.



Appliquer CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow, sculpter et polymériser.



Polir la restauration.

*Cas réalisé avec la version CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Responsabilité des images : Dr Hirofumi Tashiro.

ASSORTIMENT DE PRODUITS

SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

- #3321-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A1)
 - #3322-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2)
 - #3323-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3)
 - #3324-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2D)
 - #3325-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3D)
- 1 seringue (2,7 g/1,5 ml) 15 embouts



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

- #3301-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A1)
 - #3302-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2)
 - #3303-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3)
 - #3304-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3.5)
 - #3305-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A4)
 - #3306-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (KA6)
 - #3307-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B1)
 - #3308-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B2)
 - #3309-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (XW)
 - #3310-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2D)
 - #3311-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3D)
 - #3312-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (W)
- 1 seringue (2,7 g/1,5 ml) 15 embouts



SINGLE PACK CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

- #3341-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A1)
 - #3342-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A2)
 - #3343-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3)
 - #3344-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3.5)
- 1 seringue (2,7 g/1,5 ml) 15 embouts



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip

- #3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Needle Tip (N)
- 20 embouts





VOTRE CONTACT

Kuraray Europe Benelux

Boîte Postale 299, 1970 AG IJmuiden
Pays-Bas

Téléphone: +31 (0)255 523 701

E-mail infobenelux@kuraray.com

Site Web www.kuraraynoritake.eu

Belgique

Flandre tél.: +32 (0)475 61 60 50

Wallonie tél.: +32 (0)475 81 92 58

- Lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Les caractéristiques techniques et la forme du produit peuvent être modifiées sans préavis.
- La teinte sur papier peut différer légèrement de la teinte réelle.

CLEARFIL et CLEARFIL MAJESTY sont des marques de KURARAY CO. LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com

